


„Vibro Acoustic Sound Centre“

Dalis 24160

Garso sistema „Vibro – Acoustic“ produktams

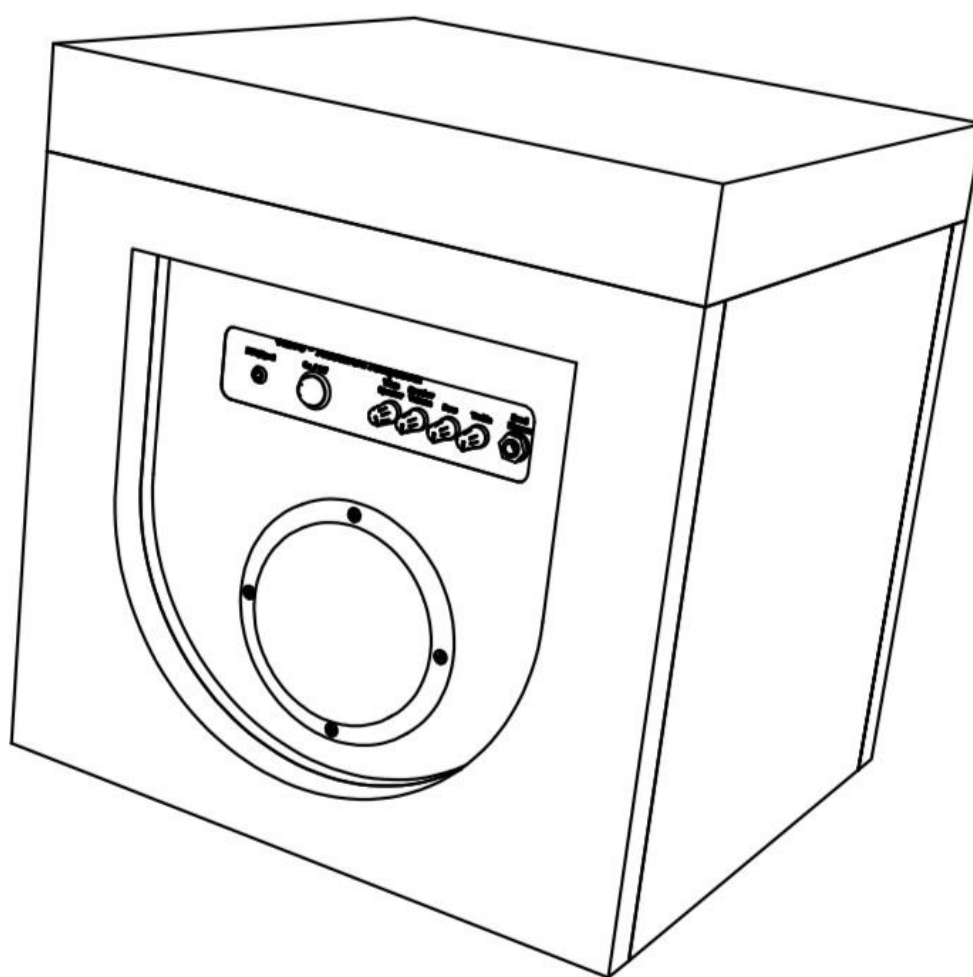

Naudojimo instrukcija



Turinys

Svarbi saugumo informacija

Įspėjimai ir pastabos	3
Atliekų tvarkymas	3

Jūsų produktas

Kas dėžėje	4
Įvadas – priekinis skydelis	5
Maitinimo įjungimas	6
Prijungimas prie „Bluetooth“	7
„Vibelite“ jungiklio prijungimas	8
Trikčių diagnostika	8
Valymas	9
Techninė priežiūra	9
Garantija	10
Techniniai duomenys	11
Atsakomybės atsisakymas	11
Kontaktai	11



Įspėjimai

Visa mūsų įranga sukurta specialių poreikių turintiems naudotojams. Rekomenduojama, kad naudojant šią įrangą būtų pasirūpinta nuolatine priežiūra.

Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose, jam naudojamas maitinimo šaltinis, kuriam naudojama saugi žema įtampa.

Jis skirtas statyti ant grindų, ant jo galima sėdėti, jeigu svoris neviršija 100 kg.

Valydami naudokite tik švelnų valdiklį ir drėgną skudurą. Prieš valydami, įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas.

Paviršiui valyti nenaudokite abrazyvinių priemonių.

Perjungimo įvestis sukurta taip, kad būtų naudojama švaraus kontakto, paprastai atviru jungikliu be įtampos. Bet koks kitoks jungiklis neveiks.

Reikėtų pernelyg nedidinti garsumo ir atidžiai stebėti garsą. Jeigu per garsu, pritildykite. Ypač tuomet, kai naudojantės „Bluetooth“ funkcija.

„Vibro Sound Centre“ išmetimas

Pasibaigus tarnavimo laikui, „Vibro Sound Centre“ reikėtų išmesti aplinkai draugišku būdu. Jungtinėje Karalystėje ir Europoje yra taikoma EEJ direktyva.

Grąžinkite šį įrenginį „Spacekraft“, kad jis būtų utilizuotas, arba kreipkitės į vietos atliekų tvarkymo atstovą, kuris yra registruotas pagal EEJ direktyvą.

Pastaba

„Vibro Sound Centre“ yra skirtas naudoti su visais „SpaceKraft“ „Vibro Acoustic“ garsiakalbiais. Tai apima: „Vibro Acoustic Body Pillow“, „Montrose Chair“, „Abbotsford Range“, „Vibro Acoustic Plinth“, „Vibro Acoustic Water Bed“, „Ball Pool“, „Cube Chair“, „Therapy Rocker“ ir „Lounger“.

Kas dėžėje

Įsitikinkite, kad turite visas nurodytas dalis




Laidas su 3,5 mm kištuku „Vibe-Lite“ jungiklis



2 kištuko adapteriai



IEC maitinimo laidas

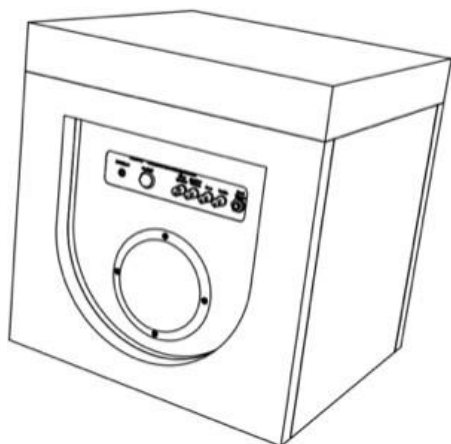

„Vibro Acoustic Sound Centre“



2 metrų ilgio laidas 3,5 mm kištuku


3,5 mm lizdui




24 V maitinimo šaltinis

Visų dalių sujungimas

1) Apverskite „Vibro Seat“ ir pastatykite ant viršaus

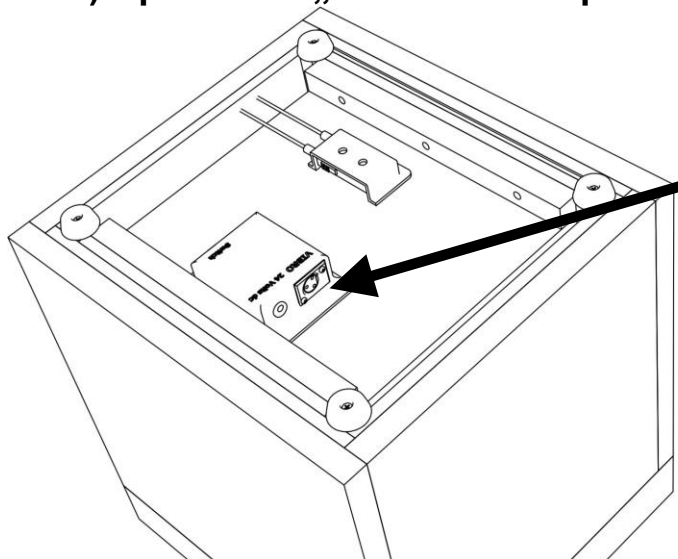


2) Prijunkite „Vibro Body Pillow“ ar kitus „Vibro“ garsiakalbius

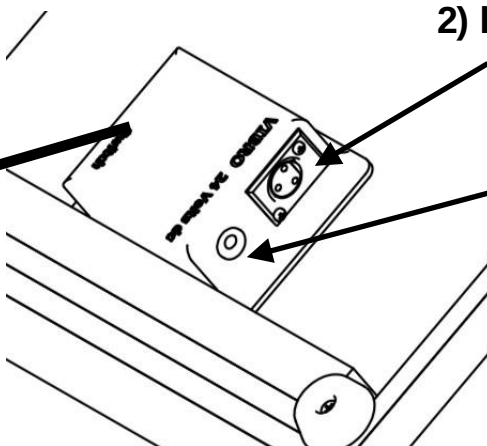


3) Prijunkite 24 V maitinimo šaltinį

4) Apverskite ir pastatykite

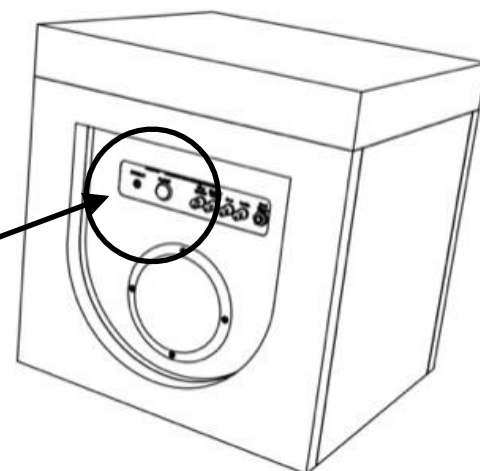

5) Prijunkite MP3 grotuvą ar muzikos grotuvą

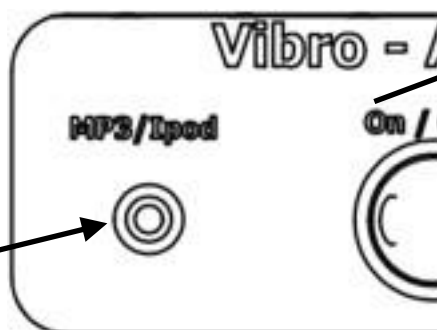


Dabar galite įjungti!

Įvadas į „Vibro Acoustic Sound Centre“

„Vibro Acoustic Body Pillow“ yra pastatomas stiprintuvas su įmontuotu garsiakalbiu ir „Bluetooth“ imtuvu. Jis veikia su įvairiais „Spacekraft Vibro Acoustic“ gaminiais, dažniausiai tai yra „Body Pillow“. Jame nėra grotuvo, todėl naudotojai turi naudotis savo pačių grotuvu, pavyzdžiui, telefonu, „iPad“ ar kitu MP3 grotuvu, turinčiu ausinių lizdą. Jame taip pat yra „Bluetooth“ modulis bevieliam naudojimui prijungiant telefoną ar kitą „Bluetooth“ prietaisą.

Jungiklio naudojimas

Galima naudoti jungiklį, skirtą valdyti „Vibro Acoustic“ garsą naudojantis „Vibro“ įranga. Galimi režimai: momentinis, nuolatinis ar riboto laiko, kad būtų paskatinta perjungimo progresija, priežastis ir poveikis.

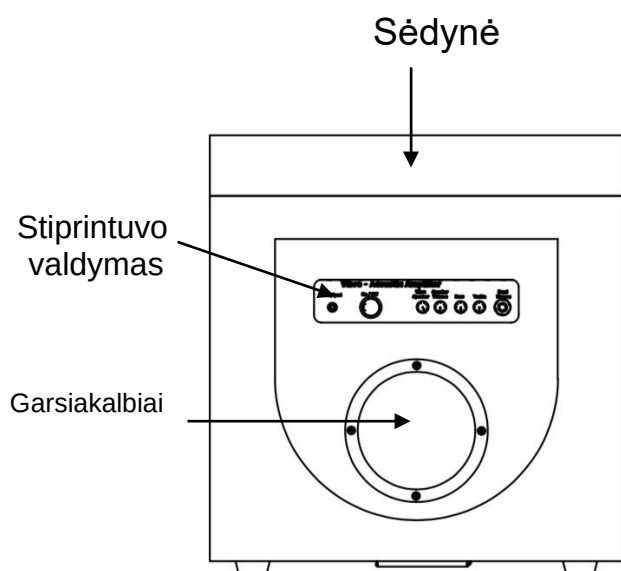


„Vibro Acoustic Sound Centre“




„Vibro Acoustic Body Pillow“ (komplekte nėra)

Ant muzikinio centro galima atsisėsti, jame yra du stiprintuvai. Vienas yra skirtas „Vibro“ įrangai, kitas vidiniam sėdynės garsiakalbiui. Abu garsiakalbius galima reguliuoti atskirais garsumo valdymo įtaisais arba balanso kontrolę. Reguliuojant žemus ir aukštus dažnius, galima sukurti tobulą garso balansą.

„Vibro“ – priekinio skydelio išdėstymas

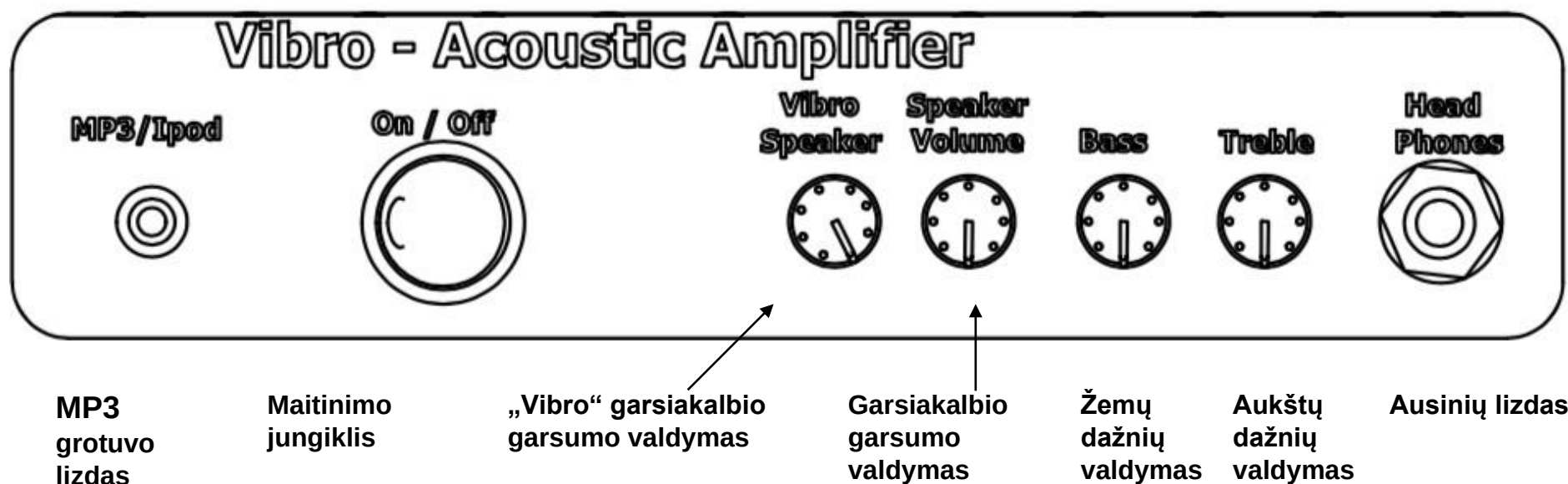

Ijungimas ir naudojimas

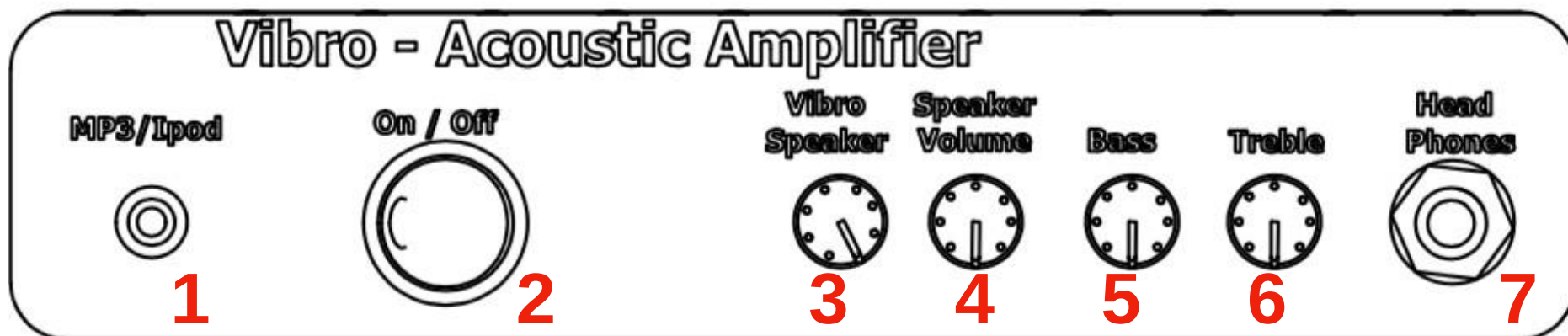


- 1) Prijunkite grotuvą, pavyzdžiui, MP3 ar telefoną į MP3 / „iPod“ lizdą (1). Naudokite pridėtą laidą su 3,5 mm kištuku. Naudokite telefono ausinių lizdą. Įsitikinkite, kad garsas įjungtas, ir paleiskite. Įsitikinkite, kad garso valdymo įtaisai 3 ir 4 sumažinti.
- 2) Įjunkite maitinimą raudonu maitinimo jungikliu (2).
- 3) Švelniai pasukite garsiakalbio garsumo valdiklį (4), kol išgirsite garsą, kuris bus tinkamo lygio.
- 4) Švelniai pasukite vibracinio garsiakalbio valdiklį (3), kol per vibracinį prietaisą pajusite vibraciją.
- 5) Sureguliuokite abu lygius, kol balansas bus malonus. Gali reikėti toliau reguliuoti garso takelių garsumą dėl skirtingų takelių garso savybių.
- 6) Pagal poreikį sureguliuokite žemus ir aukštus dažnius (5 ir 6). Jei reikia daugiau rezonanso iš vibracinio prietaiso, padidinkite žemus dažnius.
- 7) Jei norite, galite prijungti ausines (7), kad patirtis būtų intymesnė. Prieš dėdamiesi ausines, patikrinkite ausinių garsumo lygį. Kai ausinės prijungtos, vidinis vibracinis garsiakalbis neveiks.


Svarbu. „Vibro Acoustic“ įranga skirta naudotojui, kad šis pajautų vibraciją, todėl įsitikinkite, kad nustatėte patogią garso pusiausvyrą tarp vibracijos ir garsiakalbio, naudodamiesi 3 ir 4 garsumo valdikliais. Neleiskite garso tokiu garsu, kad šis būtų nepatogus.

Prijungimas prie „Bluetooth“

Pastaba. Prieš įkraudami „Bluetooth“ imtuvą, pasirūpinkite, kad jis būtų įjungtas į maitinimo šaltinį bent dvi valandos iki naudojimo. Tai galioja ir tuomet, kai „Vibro“ nėra naudojamas ilgą laiką.

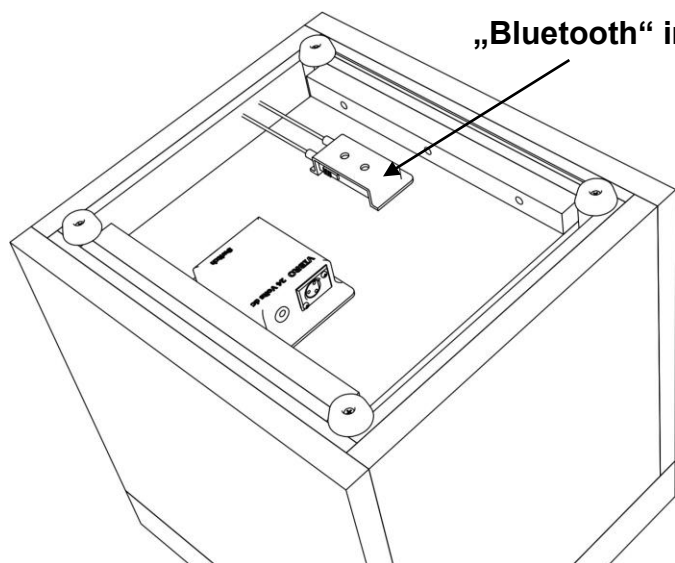

„Bluetooth“ imtuvas

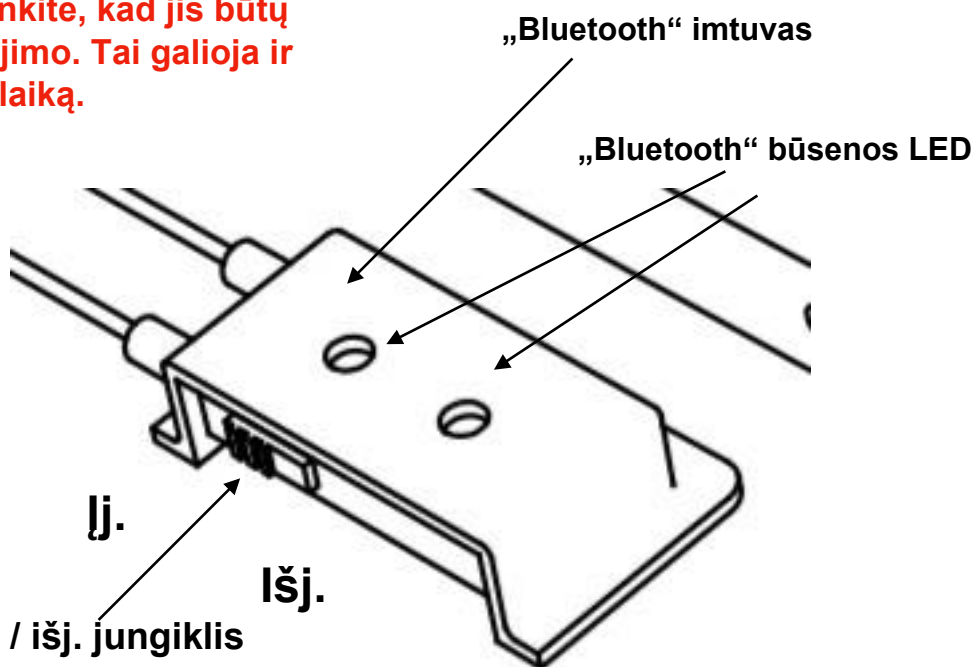

„Bluetooth“ imtuvas

„Bluetooth“ būsenos LED

Išj.


Išj.

Išj. / įj. jungiklis

1) Apverskite „Vibro Seat“ ir pastatykite ant viršaus, kad surastumėte „Bluetooth“ įtaisą.

2) Įjunkite „Bluetooth“ imtuvą, naudodamiesi jungikliu šone. Jungiklis aiškiai pažymėtas. **Jei jokia lemputė nešviečia, akumulatorius vis dar išsikrovęs.**

3) Įjungus „Bluetooth“ būsenos raudona ir mėlyna lemputės pakaitomis blyksės, tai reiškia, kad nėra prijungtas joks įrenginys (klausymosi režimas). Įrenginys ieško telefono ar kito įrenginio. Jei mėlyna lemputė blyksi kartą per sekundę, įrenginys jau prijungtas prie kito įrenginio.

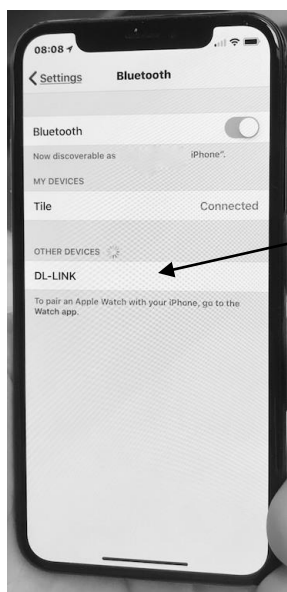


4) Eikite į įrenginio „Bluetooth“ meniu, iliustracijoje pavaizduotas „iPhone X“. Ieškokite „DLINK“. Spauskite čia. PIN kodo nėra.

5) Prisijungus bus matoma prie prijungtų įrenginių.

Dabar prisijungta prie „Bluetooth“ imtuvo. Prisijungus kartą per sekundę blyksi mėlyna lemputė.

Kai „Bluetooth“ imtuvas nėra prijungtas prie jokio įrenginio, pakaitomis blyksi raudona ir mėlyna būsenos lemputės.

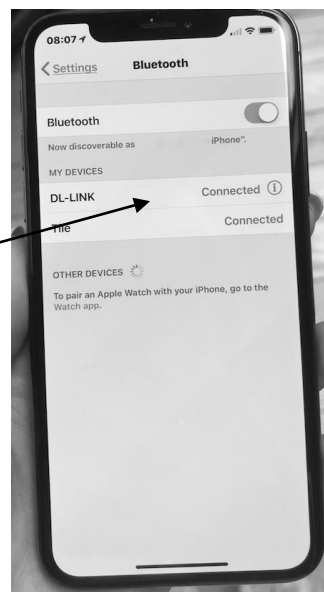

Atidarykite savo muzikos programėlę telefone ir paleiskite. Įsitikinkite, kad telefono garso lygis padidintas, o visi garso apribojimai išjungti. Nepamirškite padidinti ir sėdynės garsumo. Įsitikinkite, kad garso laidas iš MP3 / „iPod“ lizdo atjungtas. Tokiu būdu „Bluetooth“ automatiškai atjungiamas.

Po kiekvienos sesijos būtinai atjunkite „Bluetooth“ telefono.


„Bluetooth“ imtuvas naudoja vidinį įkraunamą akumuliatorių, jei jis išsikraus, „Bluetooth“ funkcija neveiks. Tai įvyks tik po ilgo neaktyvumo laikotarpio. Įjunkite visą „Vibro Acoustic Sound Centre“ į maitinimo lizdą ir įjunkite įrenginį, palikite pusvalandžiui, kol bus įkrautas. Kol kraunama, galite pasinaudoti laidu ir MP3 lizdu, kad klausytumėtės muzikos. Jei imtuvas atsijungia, išjunkite, suskaičiuokite iki dešimties ir įjunkite iš naujo.

Pastaba. Retkarčiais keičiame „Bluetooth“ imtuvo tiekėjus, taigi specifikacijos gali keistis. „iPhone“ meniu „DLink“ gali būti matomas kaip „HC-166“, tačiau valdymas nesiskiria.

„Vibe-Lite“ jungiklio prijungimas

Galima naudoti jungiklį, skirtą valdyti „Vibro Acoustic“ garsą naudojantis „Vibro“ įranga. Galimi režimai: momentinis, automatinis ar riboto laiko, kad būtų paskatinta perjungimo progresija, priežastis ir poveikis.

„Vibe-lite“ jungiklis yra su 3,5 mm kištuku, taigi naudodami pridėtą kištuko adapterį galite pakeisti į 6,3 mm kištuką. Tuomet šis kištukas jungiamas po „Vibro Centre“. Gali reikėti naudoti pridėtą

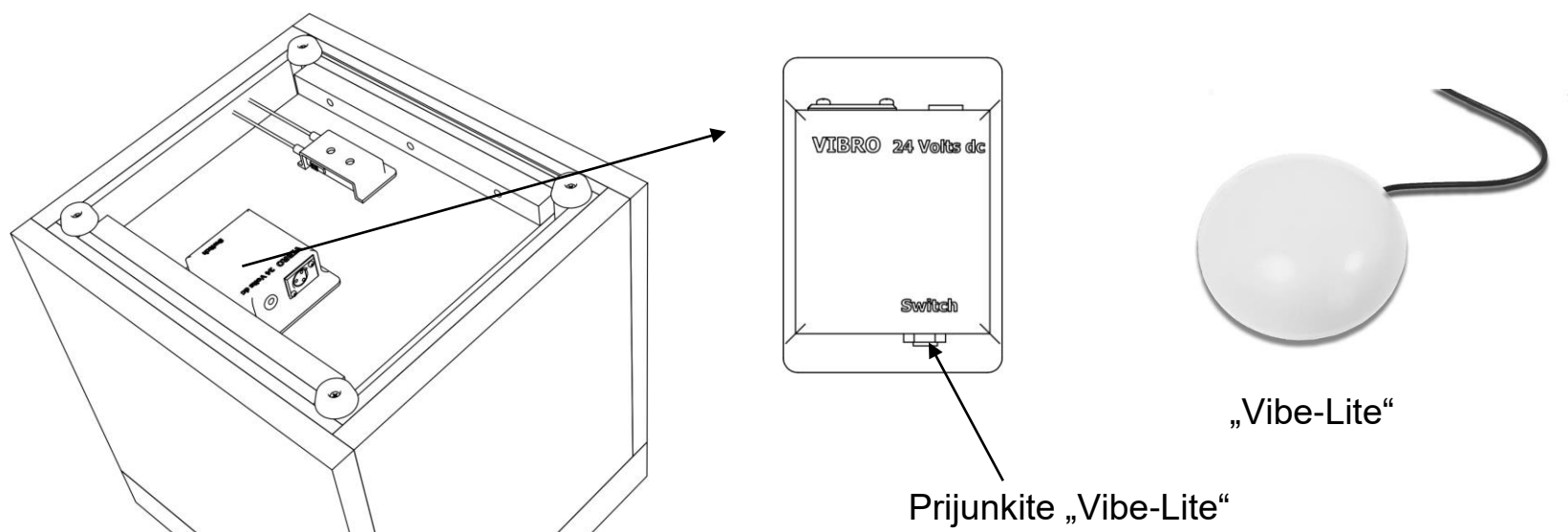

„Vibe-lite“ jungikliu dabar valdomas vibracinis garsas, sklindantis į „Vibro Acoustic“ garsiakalbį, bet ne vidinį garsiakalbį.

Šiuo metu primygtinai rekomenduojame atidaryti „Vibro-life“ jungiklį ir perskaityti instrukciją. „Vibe-Lite“ gali veikti momentiniu, nuolatiniu ar riboto laiko režimu, jūs turite pasirinkti norimą režimą.

Momentinis – veikia tik paspaudus ir laikant jungiklį.

Nuolatinis – norėdami įjungti, paspauskite vieną kartą, norėdami išjungti, spauskite dar kartą.

Riboto laiko – veikia tik iš anksto nustatytą laiką, išsijungia automatiškai, vėliau reikia paspausti vėl.

Trikčių diagnostika

K. Viskas prijungta, bet negirdžiu garso nė iš vieno garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio ir įjungtas jungiklis priekiniame skydelyje. Įsitikinkite, kad grotuvas įjungtas į MP3 lizdą priekiniame skydelyje ir nustatytas, kad veiktų, o garsumas padidintas.

K. Girdžiu garsą tik iš vidinio garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad „Vibro“ garsiakalbio garsumas padidintas, o „Vibro“ įranga įjungta po sėdyne. Įsitikinkite, kad „Vibe-Lite“ jungiklis prijungtas ir įjungtas, o akumuliatoriai nėra išsikrovę. Norėdami greitai patikrinti, tiesiog atjunkite „Vibe-Lite“.

K. Girdžiu garsą tik iš „Vibro“ garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad vidinio garsiakalbio garsumas padidintas.

K. Girdžiu garsą tik iš „Vibro“ garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad vidinio garsiakalbio garsumas padidintas.

K. Kai bandau prisijungti, „Bluetooth“ imtuvas nepasirodo.

A. Imtuvo akumuliatorius išsikrovęs. Įjunkite visą „Vibro Acoustic Sound Centre“ į maitinimo lizdą, palikite pusvalandžiui, kol bus įkrautas. Naudodami jungiklį, išjunkite „Bluetooth“ imtuvą ir įjunkite iš naujo.

Trikčių diagnostika

K. Viskas prijungta, bet negirdžiu garso nė iš vieno garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio ir įjungtas jungiklis priekiniame skydelyje. Įsitikinkite, kad grotuvas įjungtas į MP3 lizdą priekiniame skydelyje ir nustatytas, kad veiktų, o garsumas padidintas.

K. Girdžiu garsą tik iš vidinio garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad „Vibro“ garsiakalbio garsumas padidintas, o „Vibro“ įranga įjungta po sėdyne. Įsitikinkite, kad „Vibe-Lite“ jungiklis prijungtas ir įjungtas, o akumuliatoriai nėra išsikrovę. Norėdami greitai patikrinti, tiesiog atjunkite „Vibe-Lite“.

K. Girdžiu garsą tik iš „Vibro“ garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad vidinio garsiakalbio garsas padidintas.

K. Girdžiu garsą tik iš „Vibro“ garsiakalbio.

A. Įsitikinkite, kad vidinio garsiakalbio garsas padidintas.

K. Kai bandau prisijungti, „Bluetooth“ imtuvas nepasirodo.

A. Imtuvo akumuliatorius išsikrovęs. Įjunkite visą „Vibro Acoustic Sound Centre“ į maitinimo lizdą, palikite pusvalandžiui, kol bus įkrautas. Naudodami jungiklį, išjunkite „Bluetooth“ imtuvą ir įjunkite iš naujo.

Valymas

„Vibro Acoustic Sound Centre“ retkarčiais reikia nuvalyti drėgnu skuduru ir švelniu valikliu. Nenaudokite jokių abrazyvinių šluosčių, kempinių ar baliklio pagrindo produktų.

Techninė priežiūra

Nereikalinga jokia techninė priežiūra, tačiau rekomenduojame kartą per mėnesį patikrinti vinilo dangą, ar ši nėra susidėvėjusi. Po kiekvienos sesijos patikrinkite, ar kištukai ir laidai nėra pažeisti. „Bluetooth“ imtuvo akumuliatorių gali reikėti pakeisti po 2 metų.

Garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija neturi jokio poveikio jokioms įstatymu numatytoms ar kitoms pirkėjų teisėms. Jeigu per taikomą garantinį laikotarpį (8 punktas) paaiškėja prietaiso defektų dėl nekokybiškos konstrukcijos, darbo ar medžiagų atžvilgiu, remdamiesi tolesnėmis sąlygomis, savo nuožiūra įsipareigojame pasirūpinti, kad defektų turintis prietaisas (ar bet kuri jo dalis) būtų sutaisytas nemokamai.

1. Prietaisas turi būti įsigyjamas ir naudojamas tik pagal standartinę eksploatavimo instrukciją ir techninius ir (arba) saugumo standartus, kurie privalomi šalyje, kurioje prietaisas bus naudojamas.
2. Visos užklauskos turi būti teikiamos per tokius pardavėjus. Prietaisų, naudojamų JK, JAV, Normandijos salose, Mano saloje ir Airijos Respublikoje, atveju prietaisus reikėtų grąžinti pardavėjui, iš kurio prietaisas buvo įsigytas, kartu su šia garantija ir pirkimo įrodymu iš karto, kai nustatomas defektas, pirkėjui prisiimant riziką ir išlaidas.
3. Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl gaisro, nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, susidėvėjimo, neatsakingo, netinkamo reguliavimo ar taisymo, dėl žalos, padarytos naudojant prietaisą, dėl žalos, padarytos montuojant, pritaikant ar modifikuojant, naudojant netinkamai ar nesilaikant techninių ir (arba) saugumo standartų, privalomų šalyje, pervežant pirkėjui ar iš jo.
4. Jeigu bet kuriuo metu garantiniu laikotarpiu bet kuri prietaiso dalis yra pakeičiama dalimi, kuri nėra suteikta ar patvirtinta mūsų arba nėra saugi ir tinkama prietaisui, arba prietaisas buvo išmontuotas ar taisomas mūsų neįgalioto asmens, pirkėjas neturi jokių teisių ar teisių gynimo priemonių pagal šią garantiją.
5. Pirkėjo vienintelė ir išskirtinė teisių gynimo priemonė pagal šią garantiją yra į prietaiso ar bet kurios jo dalies remontą (į keitimą mūsų nuožiūra), jokia kita priemonė, įskaitant (bet neapsiribojant) atsitiktinę ar netiesioginę bet kokio pobūdžio žalą ar nuostolį, pirkėjui nebus suteikta.
6. Ši garantija netaikoma lempoms, akumuliatoriams, spalvų filtrams, spintelių dalims ar kitoms dalims, kurių yra ribotas tarnavimo laikas.
7. Mūsų sprendimas visais klausimais, susijusiais su skundais, bus galutinis. Bet koks prietaisas ar defektų turinti dalis, kuri buvo pakeista, tampa mūsų nuosavybe, kol yra apmokama visiškai.
8. Garantijos laikotarpis, taikomas visiems naujiems prietaisams, yra 24 mėnesiai.

Tinklo įtampa	110 / 240	K. S.
Maitinimo šaltinio pagrindinė įtampa	110 / 240	K. S.
Maitinimo šaltinio šalutinė įtampa	24	N. S.
Maitinimo šaltinio srovė	3	A
Maitinimo šaltinio kištuko viršutinis saugiklis	3	A
Darbinė apkrovos srovė	0,15	A
Maitinimo šaltinio atitiktis	EN-FCC	

Informacija apie produktus, kurie skleidžia elektrinį triukšmą

JAV ir Kanada

Šis įrenginys atitinka FCC ir Kanados RF pramonės spinduliuotės ribas, nustatytas plačiai visuomenei. Jis neturi būti statomas ar eksploatuojamas kartu su kitomis antenomis ar siųstuvais.
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos dvi tolesnės sąlygos. 1. Šis įrenginys privalo priimti gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga, vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalimi, atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus. Šie apribojimai yra skirti tam, kad būtų užtikrinta pagrįsta apsauga nuo kenksmingų trukdžių montuojant gyvenamosiose patalpose.
Jei kiltų problemų, pasukite ar perstatykite priimančią anteną. Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo. Įjunkite į maitinimo lizdą kitoje grandinėje negu ta, prie kurios prijungtas imtuvas.

- „Bluetooth“ imtuvas naudoja „Bluetooth 4“ technologiją
- Mažiausia garsiakalbio varža – 4 omai
- Stiprintuvo galia – 4 omai, 50 vatų
- Dėžės matmenys: 480 x 450 x 400 (A x P x G), svoris – 12 kg
- „Vibro Acoustic Centre“ yra žemos įtampos įrenginys, todėl jam nėra būtinas nešiojamo prietaiso bandymas.

Atitinka:
EB DIREKTYVĄ 2004/108/EB
BS EN 6100-3-6:2007
BENDRIEJI EMC STANDARTAI – EMISIJOS STANDARTAS GYVENAMAJAI,
KOMERCINEI IR LENGVOSIOS PRAMONĖS APLINKAI



Atsakomybės atsisakymas
Jokia šios instrukcijos dalis negali būti atkurta jokia forma ir jokiais priemonėmis – vaizdinėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant įrašus, nuotraukas ar informacijos išgavimo sistemas, neturint aiškaus raštinio šios instrukcijos leidėjo sutikimo.
Išleidimo metu visa informacija yra teisinga.



© „Spacekraft Ltd“. 2018. Visos teisės saugomos.



„Spacekraft Ltd.“, Titus House, 29 Saltaire Road, Shipley,
West Yorkshire, BD18 3HH, UK.
Tel. 01274 581007
Faks. 01274 531966

